



Relieve. Recover. Restore

Kompresyjny masażer nóg z podgrzewaniem Hi5 Venida



HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL

tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

www.habys.pl

Cechy


1. Wykorzystuje sprężone powietrze (2 tryby i 3 poziomy intensywności).
2. Masaż poduszkami powietrznymi rozluźniania mięśnie i łagodzi napięcie.
3. Urządzenie przeznaczone do masażu okolic ramion, ud lub łydek.
4. Energooszczędny i przyjazny dla środowiska akumulator.
5. Łatwy do przenoszenia, może być używany w dowolnym momencie.
6. Długość masażu kontroluje 10 minutowy, automatyczny czasomierz.
7. Wbudowana wytrzymała bateria 3.7V/2500mA.
8. Posiada funkcję ogrzewania.
9. Można go używać podczas ładowania.

Funkcje


1. Ładowarka: DC 5V ---2A.
2. Prąd (natężenie): 0.5A-1.9A.
3. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach pracy.
4. Trzy poziomy intensywności: I, II, III
5. Dwa poziomy podgrzewania: I, II, funkcja nie uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia).
6. Dwa tryby pracy:
Tryb I: masaż sekwencyjny - masuje naprzemiennie i cyklicznie uda i łydki.
Tryb II: masaż symultaniczny - masuje jednocześnie uda i łydki.
7. Obsługa za pomocą trzech przycisków: tryb pracy, ogrzewanie, zasilanie/intensywność.
8. Zabezpieczenie przeciążenia: gdy wystąpi awaria z powodu przeciążenia, zostanie uruchomione zabezpieczenie, a urządzenie wyłączy się automatycznie.
9. Zabezpieczenie przed przepięciem: po użyciu niekompatybilnej ładowarki uruchomi się funkcja przepięcia, a urządzenie wyłączy się automatycznie, czemu towarzyszą 3 szybkie błyski ostrzeżenia (ponowne włączenie spowoduje ostrzeżenie). Do ładowania należy używać ładowarki 5V.

10. Przypomnienie o braku zasilania: tryb I (tryb sekwencyjny) z lampą błyskową 1 s.
11. Gdy moc jest zbyt niska, urządzenie wyłączy się automatycznie.
12. Podczas ładowania lampka w trybie I będzie migać; po pełnym naładowaniu lampka będzie świecić.


Sposób użycia

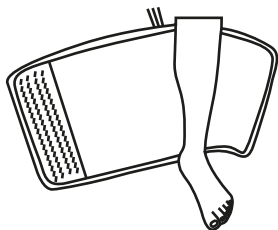


Owinąć nogi paskami
(R dla prawej, a L dla lewej nogi)

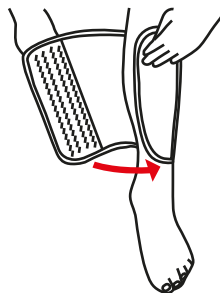


Zawinąć paski w odpowiednim kierunku,
i użyć rzep do zamocowania.

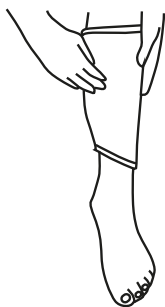


Dopasować położenie paska
do właściwej i wygodnej pozycji.

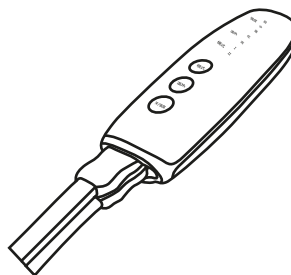

Podłączyć złącza dwóch przewodów
powietrznych do odpowiednich
gniazd w jednostce głównej.

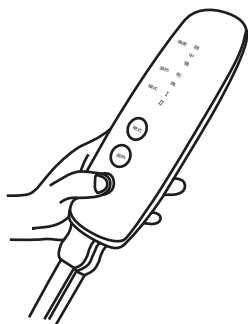

Przytrzymać przycisk żeby włączyć urządzenie i rozpocząć masaż.

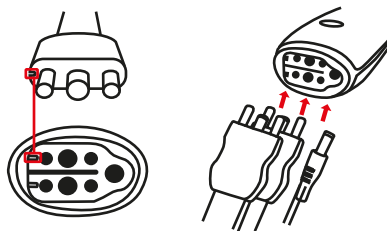

Poprawne podłączenie złączy ciśnienia powietrza i gniazda zasilania.

Instrukcja



Ikona	Pozycja	Funkcje i zastosowanie
	Przycisk zasilania /intensywności	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przytrzymaj długo, aby włączyć/wyłączyć. 2. Podczas włączania urządzenia, krótkie naciśnięcie powoduje zmianę intensywności. 3. Trzy poziomy intensywności: I, II, III 4. Po włączeniu, domyślnym trybem jest I
	Ogrzewanie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dwa tryby: I, II 2. Funkcja nie uruchamia się automatycznie, gdy urządzenie jest włączone.
	Tryb	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb I: masaż sekwencyjny, masuje naprzemiennie i cyklicznie między udami i łydkami. • Tryb II: masaż symultaniczny, masuje jednocześnie uda i łydki.

- Zaleca się korzystać z urządzenia po pełnym naładowaniu.
- Przytrzymaj dłużej przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Domyślnie włącza się Tryb I o intensywność I.
- Pełne naładowanie urządzenia trwa około 3 godzin. Po pełnym naładowaniu urządzenie można używać przez około 60 minut.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach pracy.

Uwaga

1. **Osoby z uszkodzonymi kończynami, upośledzeniami sensorycznymi lub umysłowymi nie powinny używać urządzenia samodzielnie i muszą znajdować się pod nadzorem opiekuna jeśli z niego korzystają.**
2. **Trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.**




Uwagi bezpieczeństwa



Przeciwwskazania





- **Osoby, które są w trakcie leczenia lub które mają następujące objawy powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia:**
 1. Osoby z rozrusznikiem serca lub z wszczepionymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi, które są podatne na zakłócenia elektroniczne.
 2. Osoby z nowotworami złośliwymi.
 3. Osoby z zaburzeniami krążenia w nogach i stopach.
 4. Osoby z chorobami serca.
 5. Osoby niewrażliwe na ciepło.
 6. Kobiety w ciąży lub kobiety, które właśnie urodziły.
 7. Osoby z upośledzeniem percepcji z powodu zaburzeń krążenia obwodowego wysokiego poziomu, takim jak cukrzyca.



 <p>Przeciwwskazania</p>	<p>8. Osoby z osteoporozą, złamaniem kręgosłupa, skręceniem lub nadwyrężeniem mięśni lub osoby z ostrymi bólami.</p> <p>9. Osoby, które odniosły obrażenia w obszarze masażu.</p> <p>10. Osoby, których temperatura ciała przekracza 38 °C/100.4°F i mają objawy gorączki (np. ostre objawy zapalenia, takie jak zmęczenie, dreszcze, zmiany ciśnienia krwi itp.) lub gdy czują się osłabione.</p> <p>● Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z lekarzem.</p>
 <p>Przeciwwskazania</p>	<p>● Należy sprawdzić, czy tkanina nie jest uszkodzona.</p> <p>● Jeśli jest uszkodzona, należy zaprzestać używania urządzenia.</p> <p>W przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia, porażenie prądem i oparzenia.</p> <p>* Masowanie tej samej części skóry przez długi czas w niskiej temperaturze może powodować oparzenia niskotemperaturowe, nawet jeśli nie są odczuwalne bieżące dolegliwości.</p> <p>● Nie używać funkcji podgrzewania przez zbyt długi czas, ponieważ może to spowodować oparzenia niskotemperaturowe</p> <p>*Następujące osoby mogą doświadczyć zacerwienia skóry po użyciu: osoby starsze; o delikatnej skórze lub których skóra jest podatna na zranienia. Jeśli skóra zacerwieniła się po zakończeniu masażu i zacerwienie utrzymuje się dłużej niż przez godzinę, należy skonsultować się z lekarzem.</p>
 <p>Uwaga</p>	<p>● Z urządzenia nie powinny korzystać</p> <p>*Osoby, którym lekarze zabraniają masażu (np. z zakrzepicą, ciężkim tętniakiem, ostrymi guzami naczyń dożylnych i różnymi zapaleniami lub infekcjami skóry, w tym z zapaleniem tkanki podskórnej itp.).</p>



Zasady bezpieczeństwa

 <p>Uwaga</p>	<ul style="list-style-type: none">● Nie szarpać, nie zginać kabla ładowarki i przewodów do sprężonego powietrza.● Nie kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani nie umieszczać go w ciasnej przestrzeni ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem. <hr/> <ul style="list-style-type: none">● Zabrania się korzystania z urządzenia gdy: *kabel ładowarki, złącze wtyczki przewodów ze sprężonym powietrzem jest uszkodzone; przewody ze sprężonym powietrzem nie są zbyt mocno podłączone do urządzenia.● Podczas użytkowania urządzenia nie należy stać ani chodzić.● Nie używać urządzenia pod kołdrą.
 <p>Ostrzeżenie</p>	<ul style="list-style-type: none">● Nie podłączać ani nie odłączać zasilacza mokrymi rękami.● Nie podłączać ani nie odłączać złączy mokrymi rękami.
 <p>Uwaga</p>	<ul style="list-style-type: none">● Zabrania się modyfikacji, demontażu lub naprawy we własnym zakresie.
 <p>Przeciw-wskazania</p>	<ul style="list-style-type: none">● Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać masaż.● Nie masować tej samej powierzchni dłużej niż 10 minut.● Nie ciągnąć na siłę przewodów do sprężonego powietrza podczas ich odłączania.● Używać dedykowanego kabla ładowarki.



Zasady bezpieczeństwa



Zakazy

- Nie ciągnąć na siłę kabli i przewodów do sprężonego powietrza.
- Nie wkładać ostrych przedmiotów, śmieci, wody itp. do szczeliny między kablem ładowarki a jednostką główną.
- Nie odłączać kabla ładowarki ani nie odłączać przewodów do sprężonego powietrza podczas masażu.
- Podczas przechowywania nie owijać kabla ładowarki wokół jednostki głównej ani nie owijać przewodów do sprężonego powietrza wokół pasków, ponieważ mogą zostać przerwane z powodu przeciążenia.
- Nie używać masażera z innymi urządzeniami do fizjoterapii.
- Nie używać podczas snu.
- Nie używać po spożyciu alkoholu.



Zakazy


- Nie używać w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka.
- Nie dopuszczać do zamoczenia jednostki głównej lub pasków.



Uwaga

- Gdy masażer nie jest używany, należy odłączyć zasilacz.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kompresyjny masażer nóg z podgrzewaniem Hi5 Venida	
Moc wejściowa	5V  2A	
Moc znamionowa	10W	
Nacisk	Słaby: około 35kPa Silny: około 50kPa	Średni: około 42kPa
Czas pracy	10 minut	
Pakiet (2 szt.)	Jednostka główna (1)	215x65x51mm/8.46"x2.55"x2"
	Paski (2)	650x250mm/25.59"x9.84" (dłuższy bok łuku x szerszy bok) w stanie złożonym
Waga	805g/1.77lbs (Jednostka główna + paski)	
Długość kabla ładowarki	1.2m/47.24" kabel USB	
Obwód paska	28-56cm/11.02"-22.04"	
Temperatura powierzchni tkaniny wewnątrz paska	Niska: 37°C/98.6°F	Wysoka: 50°C/122°F

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	<ol style="list-style-type: none">1. Rozładowała się bateria.2. Upewnić się, że urządzenie jest włączone.	<ol style="list-style-type: none">1. Używać po naładowaniu.2. Włączyć zasilanie.
Urządzenie nagle zatrzymało się podczas używania.	<ol style="list-style-type: none">1. Rozładowała się bateria.2. Czas masażu przekroczył 10 minut.	<ol style="list-style-type: none">1. Naładować.2. Włączyć ponownie.

Jeżeli urządzenie zepsuje się w ciągu 1 roku od daty zakupu, Hi5 naprawi, wymieni produkt lub dostarczy części zamienne, bez dodatkowych opłat.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu sprzętu,
- b) napraw poza autoryzowanym serwisem,
- c) niewłaściwego użytkowania sprzętu,
- d) uszkodzeń przekraczających koszt urządzenia,
- e) uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe przechowywanie sprzętu u Klienta (w szkodliwych warunkach),
- f) w sytuacji braku dowodu zakupu.

HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl
www.habys.pl