



VI. Elementy składowe i montaż

Dalia

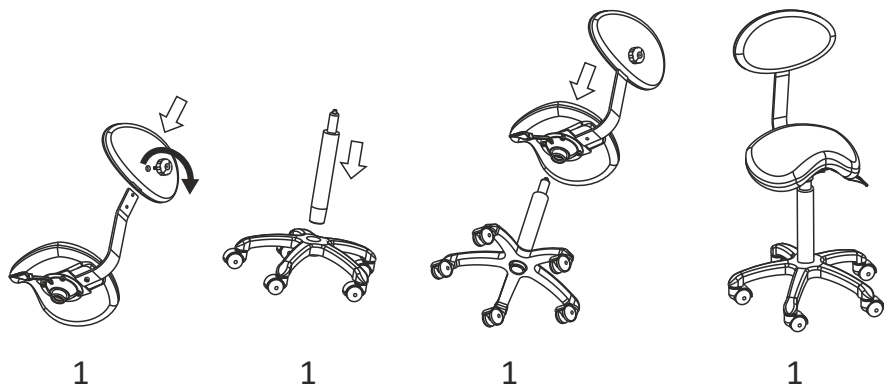

Diana

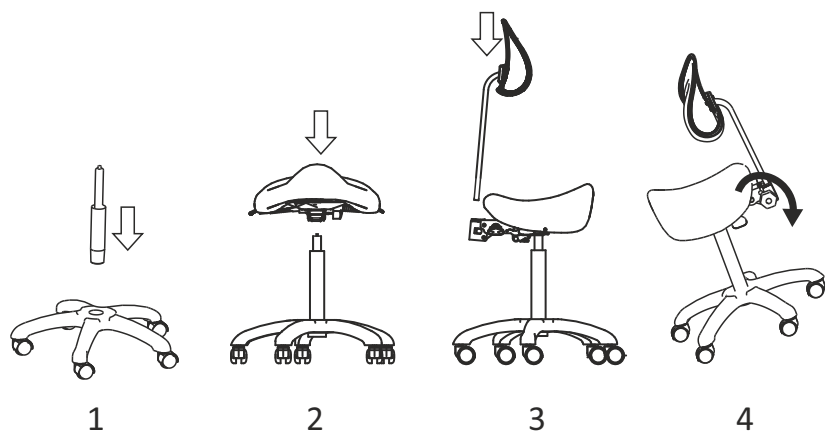

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU



Alma, Wera
Dalia, Diana



HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl
www.habys.pl

I. Obsługa

Obsługa taboretu sprowadza się do regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Istnieje także możliwość regulacji wysokości oparcia.

II. Konserwacja i czyszczenie

Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active. Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie.

III. Zalecenia


1. Użytkować taborety zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

IV. Dane techniczne

Model:	Alma	Wera	Dalia	Diana
Średnica siedziska:	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Średnica podstawy:	46 cm	55 cm	57 cm	62 cm
Grubość pianki siedziska:	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Wysokość (regulowana):	55 - 75 cm	53 - 73 cm	55 - 75 cm	52 - 72 cm
Dopuszczalne obciążenie:	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Waga:	6 kg	6 kg	9 kg	10 kg

V. Elementy składowe i montaż

Alma

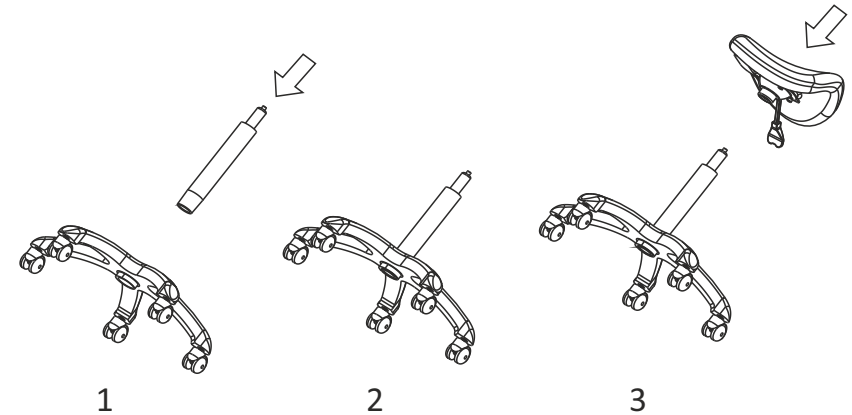

Wera

